

FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben az felügyelet alatt történik vagy tájékoztatást kapnak a készülék biztonságos használatáról és megértik az előfordulható veszélyeket!

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, illetve javítását. Ha bármilyen jellegű probléma lépne fel a készülékkel, kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel.
- A készülék helytelen használata kárt okozhat.
- Ne hagyja figyelmen kívül a biztonsági előírásokat, ne bontsa meg a készüléket vagy a kezelőfejet.
- Csak a termék saját hálózati adapterével használja.
- Használat során a kezelőfejet tartsa távol elektromágneses mezőktől és mágnesektől.



A terméket felelősség teljesen használja!



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Az útmutató tartalmazza:

- FIGYELMEZTETÉSEK
- BIZTONSÁGVÉDELEM
- HOGYAN MŰKÖDIK A LÉZER?
- MEGFELELŐ BŐRTÍPUSOK
- BŐRVIZSGÁLAT
- SZŐRNÖVEKEDÉSI CIKLUS
- MIÉRT SZÜKSÉGES KEZELÉSEK SOROZATA?
- GYAKORI KÉRDÉSEK
- HIBAKERESÉS

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

808nm hullámhossz

Biztonsági szemüveg viselése nem szükséges, mivel a termék a biztonsági funkciókat tartalmazza.


LASER SAFE[®]
TECHNOLOGY

PATENTS
PENDING



CLASS 1 PRODUCT
CONTAINING
CLASS 3B LASER


ALKOTÓRÉSZEK

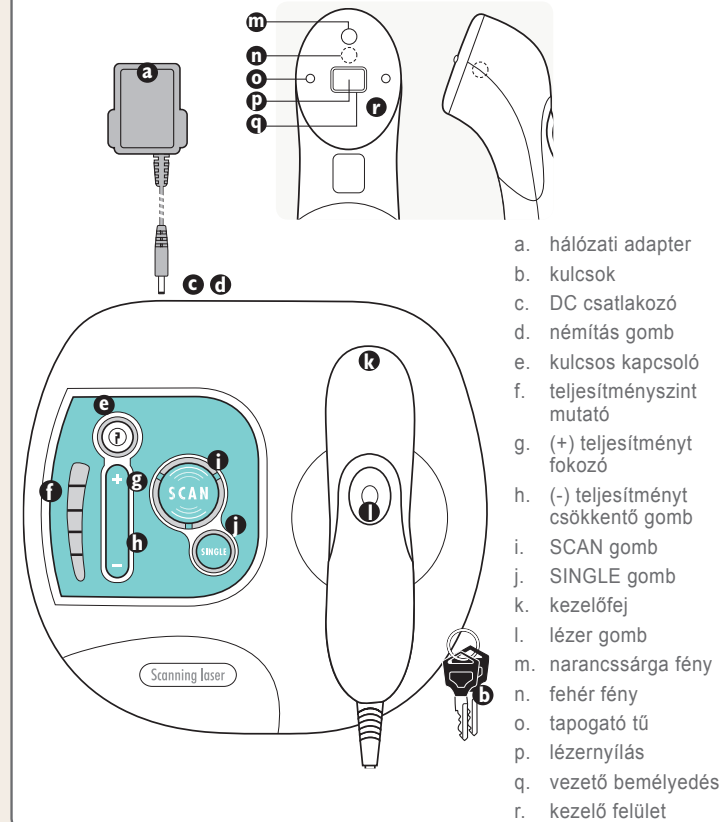

KEZELŐFEJ

SCAN mód


SCAN módban az adott területen lévő szőrszálak kerülnek kezelésre

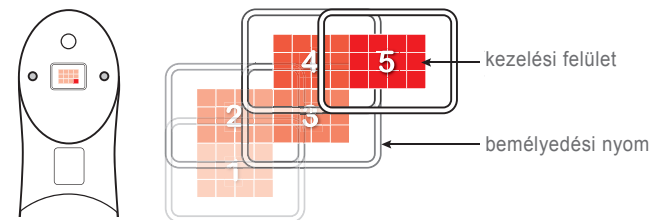

Az útmutatónak megfelelően nyomja a kezelőfejet a bőrre, mellyel a bőrön nyomot hagyva követni tudja mely területen alkalmazta már a kezelést. Letapogató módban a lézer 7mm x 5mm-nyi területet fed le.

A bemélyedő jelzések egymás átfedésével a kezelőfej minden területen biztosítja a megfelelő kezelést.

SINGLE mód

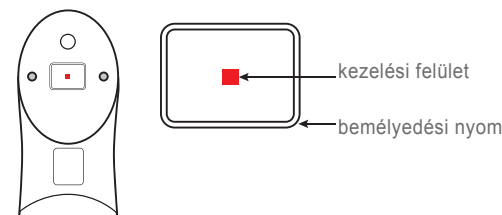

Ez a funkció a szőrszálak egyenkénti kezelésére alkalmas. A kezelt terület a kezelőfej középpontjában 2mm x 2mm nagyságú.

LÉZERES KEZELÉS

BŐRTESZT


FONTOS: A kezelés előtt 24 órával bőrvizsgálat végzése kötelező. A vizsgálat meghatározza a kezelés erősségének maximumát a bőrtípusának megfelelően. Minden területet kezelni és ellenőrizni kell. Kérjük, olvassa el a „Bőrvizsgálat” fejezetben leírtakat, és tartsa be a DVD-n szereplő utasításokat. A kezelés után enyhe bőrpír előfordulhat. A bőrpírt a szőrtüszők roncsolódása is okozhatja, mely normális jelenség.

Ha azonban a bőrpír 24 óra elteltével sem enyhül vagy múlik el, a kezelés során a teljesítmény erőssége a bőrtípushoz képest túlságosan erős volt.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE


- Kérjük, használat előtt gondosan olvassa át a figyelmeztetéseket és a biztonsági előírásokat.
- A legjobb eredmény elérése érdekében a SCAN módot alkalmazza. Ez nem szálankénti területi kezelés.
- Legjobb eredményt az előre 1-2mm-esre levágott szőrszálaknál érhetjük el.
- A kezelés idejére távolítsa el ékszereit a kezelendő területről és annak környékéről.
- Kérjük, a kezelés megkezdése előtt 24 órával végezze el a bőrpróbát.

LÉZERES SZŐRTELENÍTÉS

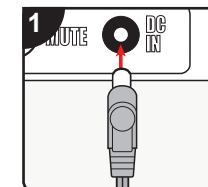


1. LÉPÉS

Csatlakoztassa az adapter vezetékét a készülékhez, majd dugja be a hálózatba.

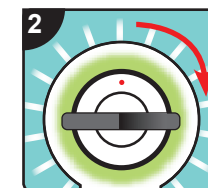

2. LÉPÉS

A kulcs elfordításával kapcsolhatja be a készüléket. A kulcs körüli világítás zöldre vált.


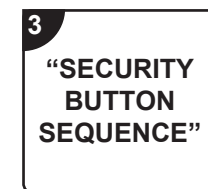


3. LÉPÉS

A kulcs elfordítása után 60 mp-en belül nyomja meg a biztonságvédelmi gombot.

Erről bővebb leírást a használati útmutatóban találhat.

A kulcs körüli zöld fény teljes mértékben világít. A SCAN és a SINGLE módot kiválasztó gombok körül kék fény jelenik meg. Az kezelés erősségét mutató kijelző a legalsó szinten világít.

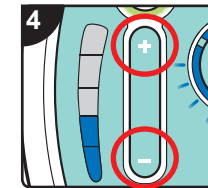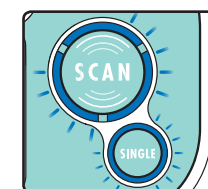

4. LÉPÉS

A +/- gombok segítségével válassza ki a bőrtípusának megfelelő erősségi szintet. Olvassa el a használati útmutatóban a bőrvizsgálatról szóló részt.

Minden alkalommal, mikor a kezelés erősségét állítja, ki kell választania a kezelés módját is a folytatáshoz.


MEGJEGYZÉS: Ha 20 percig nem használja, a készülék energiatakarékos módra kapcsol. A narancssárga fény villogni kezd, és a teljesítményszint visszaáll az 1- es szintre. Újraindításhoz fordítsa el a kulcsot, majd kapcsolja be újra és folytassa a 3. lépéssel.

SCAN KEZELÉS



5. LÉPÉS

Nyomja meg a SCAN gombot. A gomb körül kék fény gyullad ki. A kezelőfejen kigyullad a narancssárga fény.

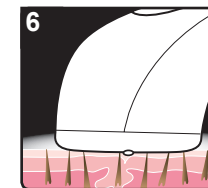


6. LÉPÉS

Helyezze a kezelőfejet a kezelni kívánt területre úgy, hogy a tapogató tűk érintkezzenek a bőrrel.

Olvassa el a kezelési területre és a tapogató módra vonatkozó részeket.


A narancssárga fény fehérre vált át.

A SCAN gomb körüli kék fény jelzi, hogy a készülék készen áll a kezelés elkezdésére.

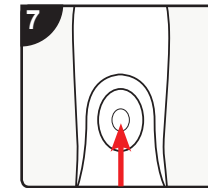


7. LÉPÉS

Nyomja meg és tartsa lenyomva a LÉZER gombot a kezelőfej tetején.

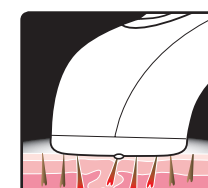

A fehér fény villogni kezd, jelezve hogy a lézeres kezelés folyamatban van. A készülék sípolni kezd, melyet le lehet némítani. A lézersugár nem látható. Mikor a kezelés véget ér, a fény újra narancssárgára vált.

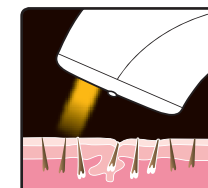


Ezután helyezze át a kezelőfejet a következő, kezelni kívánt területre.

Mikor a következő területre teszi a kezelőfejet, emelje fel a bőrről, és úgy vigye át.

Olvassa el a kezelési területre és a SCAN módra vonatkozó részeket.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK – kérjük, figyelmesen olvassa el

- Ne mozgassa a kezelőfejet a kezelés alatt. Lehet, hogy melegséget érez a kezelés alatt, ez teljesen normális.
- Ha a kezelés alatt megszűnik az érintkezés a tapogató tűk és a bőr között, a fehér fény narancssárgára vált. Amint a két felület újra érintkezik, a kezelés folytatódik.
- Biztonsági okokból, ha a kezelőfej nem illeszkedik pontosan a kezelni kívánt bőrfelületre, a fehér és a narancs fények villognak és a kezelés nem folytatódik.
- A kezelés során ritkán enyhe égett szag és minimális füst jelentkezhetnek.
- A sikeresen kezelt szőrszálak nem mindig azonnal hullnak ki, de idővel a szőrtüszők elhalnak, és enyhe dörszöléssel ezek kihullása gyorsítható.
- A kezelés során apró tűszúrásokhoz hasonló érzése lehet. Helyi bőrpír a szőrtüszők elhalása miatt előfordulhat. Ha azonban a bőrpír 24 óra elteltével sem enyhül vagy múlik el, a kezelés során a teljesítmény erőssége a bőrtípushoz képest túlságosan erős volt. Kérjük, olvassa el a bőrpróbára vonatkozó részt a használati útmutatóban. Fontos azonban megjegyezzük, hogy idővel a tartósabb bőrpír is eltűnik.

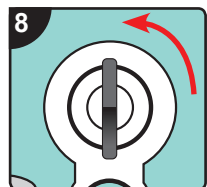


8. LÉPÉS

A készülék kikapcsolásához fordítsa a kulcsot az óramutató járásával ellenkező irányba. Távolítsa el a kulcsot és tegye biztonságos, gyermekek elől elzárt helyre.

Megjegyzés: Ha a készülék rendellenesen viselkedne, lehet, hogy elektromágneses rezgések a felelősek, mint például villanymotoros készülékek, hangszórók.

Ebben az esetben távolítsa el ezeket, és indítsa újra a készüléket


SINGLE MÓD

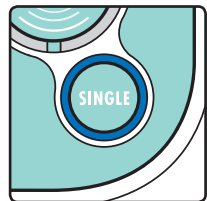

Lehetősége van a SINGLE mód használatára is, melynek során egyetlen szőrszál kezelését végezheti.

Nyomja meg a SINGLE gombot, ekkor körülötte kék fény jelenik meg.

A kezelőfej narancssárgán világít.

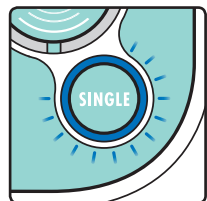

A SINGLE módban a SINGLE gomb körül kék fény villog.


Lapozza fel a használati útmutatóban a SINGLE mód részt.

EGYÉB INFORMÁCIÓK



A készülék hátulján lévő MUTE gomb megnyomásával kikapcsolhatja a hangjelzéseket. A gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhatja.


Megjegyzés: A figyelmeztető hangokat ezzel nem kapcsolja ki.

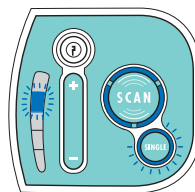

újraindítás 'kizárás' után

Ha a készülék bármely okból 'kizár', az ábrán látható módon kék fény villog.

Az újraindításhoz kapcsolja ki a készüléket a kulccsal, majd 5 másodperc múlva ismét kapcsolja be.

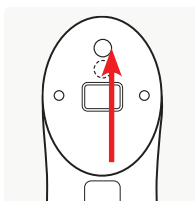

laser apertur

a lézernyílás tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze a lézernyílás tisztaságát.

A felhalmozódott piszok befolyásolhatja a lézer hatékonyságát. Ha bármikor ilyet észlel, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert. Ekkor egy puha, száraz ruhával törölje át.

SALON LASER™

LETAPOGATÓ SZŐRTELENÍTŐ

LAHC



Utasítások

FIGYELMEZTETÉSEK

- Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg, mert előfordulhat, hogy a későbbiekben is szüksége lesz rá.

- A készülék nem alkalmas afro-karibi, és fekete bőrszínű személyek számára. Nem alkalmas ősz szőrszálak kezelésére. (lásd: megfelelő bőrtípusok pont)

- A lézeres szőrtelenítés nem okoz kellemetlenségeket. Ha bármiféle kellemetlenséget, vagy fájdalmat érez, az intenzitás erőssége túlságosan magas, vagy a készülék nem alkalmas az Ön bőrtípusának kezeléséhez.

- A beépített biztonsági funkciók védik a szemet a lézersugaraktól, de soha ne irányítsa a kézi egységet szembe vagy annak közelébe.

- Ne használja gyúlékony anyag közelében.

- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

- Visszaverődés veszély: Kérjük, használat előtt távolítsa el ékszereit a kezelni kívánt felületről és annak környékéről.

- Ha nem használja, a kulcsot tárolja biztonságos helyen, gyermekektől elzárva.

- Ne kezelje ugyanazt a területet többször egy kezelés alatt.

- Ne használja, ha alkoholt fogyasztott, ha rossz közérzetű, vagy fáradt.

- Ne használja a következő területeken: tetoválásokon, pattanásokon, szemölcsökön, fekete foltokon vagy anyajegyeken, sötét foltokon, bőrbetegségek esetén, tűzfoltokon, égési sérüléseken, a száj, a mellbimbók, a nemi szervek és a végbél területein, ekcémánál, a szempillánál, a szemöldöknél, a szemek közelében, az orr illetve a fül szőrzetére.

- Ez egy érzékeny letapogatós lézerkészülék. Ügyelni kell, hogy a kezelőfej ne sérüljön.