


ULTRASONIC FACIAL

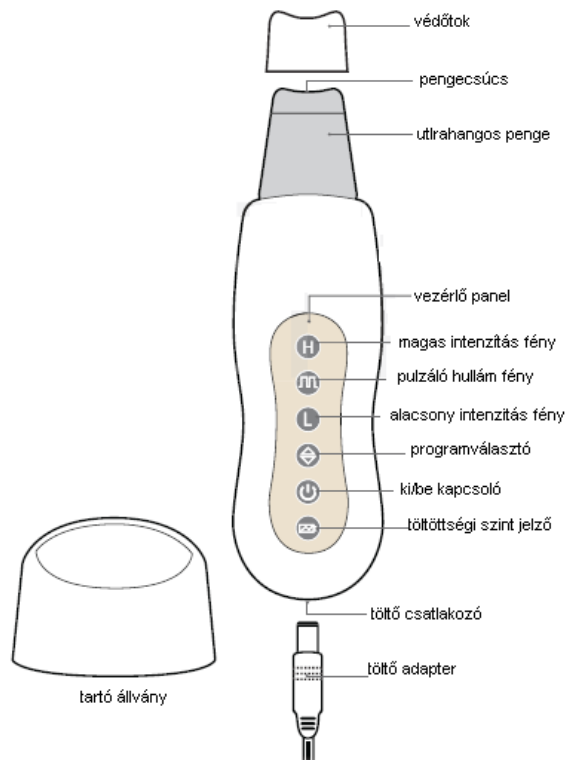


Az első használat előtt 8 órán át töltsd a készüléket!

Óvintézkedések

- Kérjük, olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi tanulmányozásra.
- A készüléket 8 év alatti gyermek vagy csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben az felügyelet alatt történik vagy tájékoztatást kapnak a készülék biztonságos használatáról és megértik az előfordulható veszélyeket!
- Ne használja a készüléket, ha Ön terhes vagy az alábbiak közül bármelyik eset fennáll Önnél: pacemaker, szívbetegség, alacsony vérnyomás, epilepszia, diabétesz, szklerózis multiplex, műtét utáni lábadozás.
- Ne használja hegeken, sérült, hólyagos, beteg, pattanásos, ekcémás vagy bármilyen rendellenességgel bíró bőrfelületen. Ha nem biztos benne, forduljon orvoshoz.
- Ha a szérum a szemébe jutna, bő vízzel öblítse ki. Amennyiben irritáció lépne fel, forduljon orvoshoz.
- Csak külsőleg használható.

MÉLYTISZTÍTÁS

A mélytisztítási kezelés, folyamatos hullámokat használ bőrfelületen található elhalt sejtek eltávolításához, mely után a bőr felfrissül és megfiatalodik, kismul. Ez az eljárás eltávolítja a bőrbe kerülő szennyeződések.

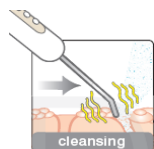

A pengecsúcsra koncentrált ultrahangos rezgés célzott mélytisztítást tesz lehetővé.

FOLYAMATOS HULLÁM PROGRAMKIVÁLASZTÁS



Kapcsolja be a készüléket a **ki/be** kapcsoló gombbal.



Alacsony intenzitású folyamatos hullám program.
Automatikusan az alacsony intenzitású folyamatos hullám program kerül kiválasztásra.



Nyomja meg kétszer a **programválasztó gombot** a magas intenzitású folyamatos hullám program kiválasztásához.



Magas intenzitású folyamatos hullám program.
A program kiválasztásakor a magas intenzitás jelzőfény kékén világít.

HOGYAN HASZNÁLJA



Melegvizes arckendővel törölje át arcát.
Megjegyzés: a legjobb eredményt fürdés vagy zuhanyozás utáni kezeléssel érhet el. Heti 2 – 3 kezelés javasolt.



Kapcsolja be a készüléket és válassza ki az alacsony vagy a magas intenzitású folyamatos hullám programot.
Az alacsony intenzitású programmal történő kezdés javasolt.



Tartsa úgy a készüléket, hogy a vezérlőpanel ne az arca felé nézzen.



Enyhe nyomással tolja végig az ultrahangos pengét a bőrfelületen. A penge csúcsán látható lesz egy finom vízpermet és az összegyűlt elhalt hámsejtek. A legjobb eredmény eléréséhez, lassan mozgassa a pengét.




Az ábra szerint menjen végig az arc területein.



Használat után kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa meg a pengét és helyezze rá a védőtokot.
Megjegyzés: Ha bekapcsolva hagyja a készüléket, az 10 perc után automatikusan kikapcsol.

SZONOFORÉZIS

A szonoforézis kezelés pulzáló hullámokat használ javítva ezzel a bőr átjárhatóságát, elősegítve ezzel a kezelőszérum felszívódását. Ez és az ultrahangos hullám által generált megnövekedett keringés elősegíti a bőr feltöltődését, csökkentve ezzel a ráncok mélységét. Javasoljuk, hogy ezt a kezelést a mélytisztítás után végezze.

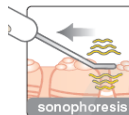

Helyezze a pengét lapjával a bőrfelületre, hogy az ultrahangos „paskolás” elősegítse a kezelőszérum felszívódását a bőrfelületen.

PULZÁLÓ HULLÁM PROGRAMKIVÁLASZTÁS



Kapcsolja be a készüléket a **ki/be** kapcsoló gombbal.



Nyomja meg egyszer a **programválasztó gombot** az alacsony vagy háromszor a magas intenzitású pulzáló hullám program kiválasztásához.



Alacsony intenzitású pulzáló hullám program.
Ha ezt a programot választja, egy szaggatott szonikus vibrálást fog hallani, az alacsony intenzitás jelzőfény kékén világít és a pulzáló hullám fény felvillan.



Magas intenzitású pulzáló hullám program.
Ha ezt a programot választja, egy szaggatott szonikus vibrálást fog hallani, a magas intenzitás jelzőfény kékén világít és a pulzáló hullám fény villan fel.

HOGYAN HASZNÁLJA



Vigyen fel vékonyan egy kis kezelőszérumot az arcára.
Megjegyzés: a legjobb eredményt fürdés vagy zuhanyozás utáni kezeléssel érhet el. Heti 2 – 3 kezelés javasolt.



Kapcsolja be a készüléket és válassza ki az alacsony vagy a magas intenzitású pulzáló hullám programot.
Az alacsony intenzitású programmal történő kezdés javasolt.



Tartsa úgy a készüléket, hogy a vezérlőpanel az arca felé nézzen.



Enyhe nyomással húzza végig az ultrahangos pengét a bőrfelületen. A kezelőszérum fokozatosan jut be a bőr mélyebb rétegeibe. A legjobb eredmény eléréséhez, lassan mozgassa a pengét.



Az ábra szerint menjen végig az arc területein.



Használat után kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa meg a pengét és helyezze rá a védőtokot.
Megjegyzés: Ha bekapcsolva hagyja a készüléket, az 10 perc után automatikusan kikapcsol.

TÖLTÉS

A készüléket az első használat előtt addig töltsd, míg a vörös töltésjelző fény ki nem alszik. Ez akár 8 óráig is eltarthat, a töltöttségi szinttől függően. Amikor az akkumulátor eléri az alacsony töltöttségi szintet, a sípol és automatikusan kikapcsol.



Csatlakoztassa a töltő adaptert a töltő csatlakozóba és dugja be az elektromos hálózathoz.



Töltés alatt a töltöttségi szintjelző vörösén világít.



Amikor a készülék teljesen feltöltődött, a töltöttségi szintjelző kialszik és a készülék használatra kész.
Ekkor húzza ki a töltőt a készülékből és az elektromos hálózathoz.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK!

- NE merítse a készüléket vízbe.
- A készülék NEM vízálló ezért ne helyezze olyan helyre, ahol vízbe eshet vagy vízhez érhet.
- A készüléket nyirkos textíliával tisztítsa, ne használjon tisztító vagy oldószereket.
- A pengét is nyirkos textíliával tisztítsa, ne használjon tisztító vagy oldószereket és tisztítás után törölje szárazra.
- NE helyezze a készüléket hőforráshoz közeli helyre.
- NE használja a készüléket, ha az rendellenesen működik, vagy ha leejtette és az megsérült.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket, mert az nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket.
- A készülék nem megfelelő használatra sérülést okozhat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

E-mail: info@mopa.co.hu, Telefon: +36 30 6 560 292

Munkanapokon: 9.00-16-óraig

A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

E-mail: info@mopa.co.hu

A készülék normál használatára esetén 2 év cseregaranciát biztosítunk.

Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia csak a számla bemutatásával érvényesíthető!

ÁRAMTALANÍTÁS

Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékaiknak kezeléséről szóló (2002/96/EC) (Waste of Electrical and Electronic Equipment –

WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká vált elektronikai termékek újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló újráfeldolgozási és újrahasznosítási technológiák alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások minimalisra csökkentése, az esetleges veszélyes összetevők kezelése és a hulladéklerek rohamos növekedésének elkerülése érdekében.

A termék besorolás szerint elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának lejártakor, azt a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni!

Műszaki Adatok: Töltő adapter
Bemenet: 100V-240V 50Hz
Kimenet: 6V, DC 1.0A
Készülék
Kimenet: 25 KHz
akkumulátor: 3,7V/950mAh



Olvassa el a használati utasítást és őrizze meg.

A készülékben Lithium-Ion akkumulátor található

A készülék nem tölthető a fürdőszobában.

A készülék csak beltéri használatra való.

A készülék megfelel az idevágó EU direktíváknak.

A csatlakozó aljzat központi tűje pozitív.