


FOGÍNY BETEGSÉG ÉS FOGSZUVASODÁS

A fogkő az egyik oka a fogszuvasodás kialakulásának. A baktériumok színtelen, ragadós rétege, a fogak felszínén halmozódik fel, amely reakcióba lép az elfogyasztott ételekben és italokban található cukorral és keményítővel. Ez a reakció különböző savakat hoz létre, amelyek megtámadják a fogzománcot, legyengítve és sérülékennyé téve a szuvasodással szemben.

Három hely van a fagon és környékén, ahol a szuvasodás kialakulhat a fogkő lerakódása miatt.

1. A fogak felső részén lévő vájatokban (a rágó felületen).
2. A fogak között.
3. A fog és a fogíny közötti résekben.

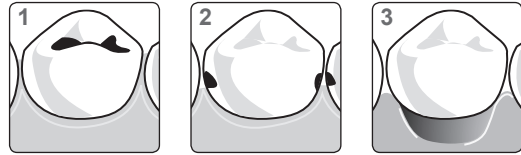


A fogak közötti rés és a fogíny rendszeres tisztítása a napi fogtisztítás alapvető részének kell lennie a fogkő lerakódás és fogíny betegség megelőzése érdekében.

ELEMEK BEHELYEZÉSE

Mindig a megfelelő típusú elemeket használjon (2 db AA). Jó minőségű, szivárgás mentes alkáli elemek használata erősen ajánlott.

Fontos – Mindig azonnal távolítsa el és cserélje ki a lemerült elemeket! Távolítsa el az elemeket a fogkő eltávolító és polírozó készülékből akkor is, ha hosszabb ideig nem használja!

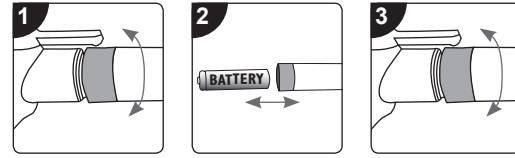

TISZTÍTÁS

- Húzza le a gumi fejet, majd meleg vagy hideg csapvízzel tisztítsa meg.
- Törölje tisztára a polírozó hegyét egy benedvesített textíliával és mossa le a külső részt folyó meleg vízzel, akár szappant is használva, amennyiben szükséges. Soha nem kell szétszednie a fogórészt, illetve a motort tisztítás céljából!
- Helyezze vissza a gumi fejet a polírozóra, miután megtisztította a készüléket. Ha a polírozó fej élein a kopás jelei erősen láthatók, ki kell cserélni egy új darabra.

MEGJEGYZÉSEK

- Néhány másodpercnél tovább nem szükséges egy fog polírozása. A túl sok polírozás lassú eróziót okozhat a fogzománcon!
- A lehetséges fogíny betegségek átvitelének és a megfertőződések elkerülése miatt a terméket csak egy személy használja!
- A fogkő eltávolító és polírozó készüléket havi kettő alkalomnál többször nem kell és nem is javasolt használni! Tanácsolt ezen felül a napi kétszeri fogmosás! A fogköz tisztítót, a fogkő eltávolító eszközt és a lerakódás eltávolítót akkor használja, amikor szükségesnek érzi. Rendszeresen keresse fel fogorvosát fogászati ellenőrzés és kezelés céljából!

ÁRTALMATLANÍTÁS



Ezen berendezés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EC Európai Unió irányelvnek (WEEE). Ezen irányelv alapján egész Európában a készüléket átveszik, majd elektromos és elektronikai hulladékként újrahasznosítják.

Amennyiben készüléke elérte élettartama végét és ki szeretné dobni, kérjük, hogy az erre szakosodott elektronikai és elektronikus hulladékok begyűjtésével foglalkozó cégeknek szíveskedjen leadni! Ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt!

FONTOS!


- A készülékben nincsenek a Felhasználó által javítható alkatrészek! Soha ne szedje szét és ne próbálja megjavítani! Ha problémája adódik a készülékkel, hívja Ügyfélszolgálatunkat!
- Soha NE merítse vízbe a fogkő eltávolító és polírozó készüléket!
- A fogkő eltávolító és polírozó készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja!



Rio, Dezac és Dental Polisher™ a The Dezac Group Ltd bejegyzett védjegyei!
www.riobeauty.com

DENTAL POLISHER™


FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ ÉS POLÍROZÓ DENTAL POLISHER

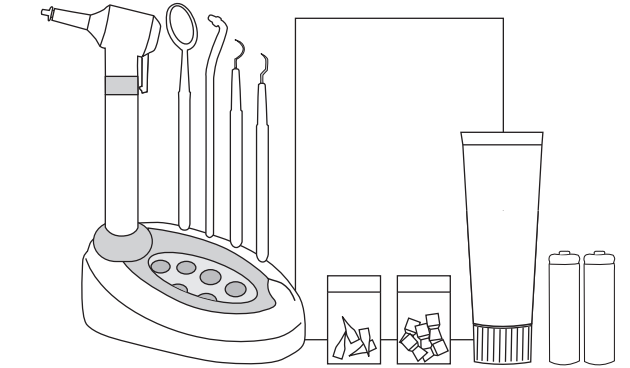

A fogkő eltávolító, polírozó és higiéniai készlet részei egy fogköz tisztító, egy fogkő eltávolító eszköz és egy lerakódás eltávolító. A készlet eszközeit a megszokott fogápolási folyamatok közben használja. Fontos, hogy fogorvosa által ajánlott időközönként rendszeresen látogassa a fogászati vizsgálatokat. E termék használata nem helyettesíti a fogorvosi vizsgálatokat.

Kérjük, olvassa el alaposan a használati utasítást és őrizze meg, hogy a jövőben bármikor újra átolvashassa!

FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ-POLÍROZÓ ÉS TARTOZÉKAI

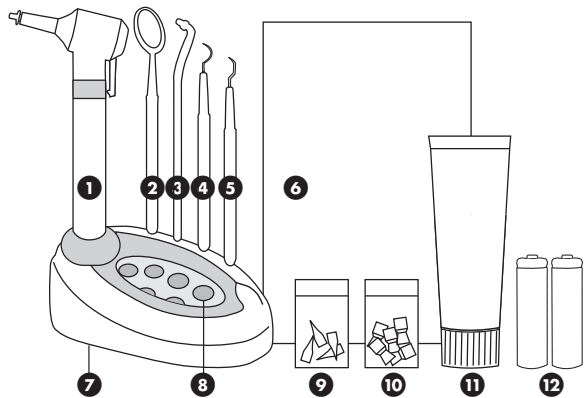


- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Fogkő eltávolító és polírozó | 8. Tároló hely a gumi fejekhez |
| 2. Fogtűkör | 9. Lerakódás eltávolító fej |
| 3. Lerakódás eltávolító | 10. Fogkő eltávolító és polírozó gumi fejek |
| 4. Fogköz tisztító | 11. Fogfehérítő krém |
| 5. Fogkő eltávolító | 12. Elemek |
| 6. Használati útmutató | |
| 7. Eszköztartó | |


FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne nyelje le a tartozékokat! Ne nyelje le a fogkövet, kezelés után öblítse ki a száját!
- A termék használata nem ajánlott 12 év alatti gyermekeknek.
- Ne érjen a szeméhez fogfehérítővel. Amennyiben a fogfehérítő szembe kerül, öblítse ki vízzel.
- A Rio fogkő eltávolító és polírozó készülék használata nem helyettesíti a fogászati vizsgálatot. Rendszeresen látogassa fogorvosát!


FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ ÉS POLÍROZÓ

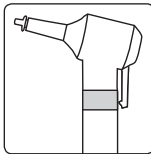


A fogkő eltávolító és polírozó segít eltávolítani a lerakódásokat és elszíneződéseket az elülső fogai felületéről. Kifényesítheti és kipolírozhatja fogait, így két fogorvosi látogatás között is megőrizheti fogai esztétikus kinézetét.

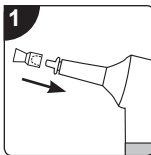


Helyezzen egy polírozó gumifejet a fogkő eltávolító és polírozó végére.

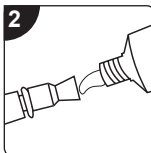

Kis mennyiséget nyomjon a fogfehérítőből a gumifejbe. Ha gondolja, vigyen fel egy kis mennyiséget a fogak elejére is.

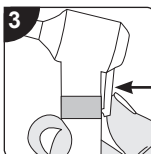


Nyomja le a polírozó hátoldalon lévő kapcsolót, miután gyengéden a fogához érintette a gumifejet. A polírozó leállításához engedje el a kapcsolót.

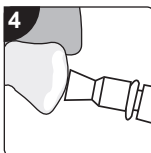


Helyezze a készüléket a kezelni kívánt fogra. Polírozás közben ne nyomja a fogra túl erősen a gumifejet, mert a gumifej forgása automatikusan leáll (biztonsági funkció). Helyezzen a fejre (illetve a fogra) újból fehérítőt, amennyiben szükséges.


LERAKÓDÁS ELTÁVOLÍTÓ

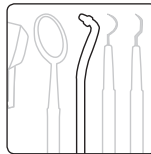

A lerakódás eltávolító segítségével olyan makacs lerakódásokat távolíthat el elülső fogairól, mint például tea, kávé vagy cigaretta okozta foltokat. Két fajta hegyet talál; a narancsszínű kicsivel keményebb, a színtelen fej lágyabb. Próbálja ki mindkettőt, hogy melyik használatát érzi megfelelőnek az Ön számára. Különösen ügyeljen a fogíny közelében történő használat során, ne nyomja oda túl erősen, mert a fogzománc itt sokkal gyengébb, és a fogínyt könnyen lenyomhatja a fognyak alatti részről. A lerakódás eltávolítót nem szabad használni a fognyakon és az esetlegesen lecsupaszított foggyökéren.

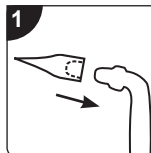

Helyezzen egy hegyet a lerakódás eltávolítóra. Ha erős lerakódás vagy ételmaradék látható a fogakon, mosson először fogat, majd használja a fogköz tisztítót vagy fogkő eltávolítót. Alaposan öblítse ki a száját szájvízzel.

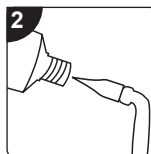


Helyezzen fel egy kis fehérítőt a hegyre úgy, hogy azt a tubus nyílásába illeszti és belemártja.




Dörzsölje gyenge vagy közepes erőt kifejtve a fog elülső oldalán látható foltos területet a lerakódás eltávolítóval. Rövid, dörzsölő mozdulatokat tegyen, néhány mozdulat után váltson irányt. Öblítse ki a száját, és ismételje meg az eljárást, ha a folt továbbra is látható. Alkalmazzon újra fogfehérítőt, amennyiben szükséges.

FOGKÖZ TISZTÍTÓ

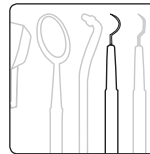


A fogköz tisztítóval ételmaradékot, lerakódásokat és fogkövet távolíthat el a nehezen hozzáférhető helyekről, a fogak között és fogíny felett.

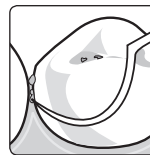


Úgy tartsa a fogköz tisztítót, mint egy tollat. A fogtűkör használatával a nehezen látható területeket nézheti meg a fogak és az íny körül. A fogköz tisztítóval távolítsa el a beszorult ételmaradékokat, lerakódásokat vagy fogkövet.

FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ

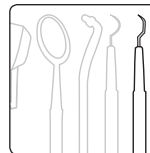

A fogkő eltávolítóval megszabadíthatja a fogakat és az íny feletti részeket a lerakódott fogkőtől.

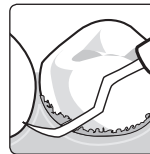

Úgy tartsa a fogkő eltávolítót, mint egy tollat, és a fogtűkörral derítse fel a kezelni kívánt területet. Az egyik kaparó éllel gyenge vagy közepes erőt kifejtve dolgozza át a fog felületét. Távolítsa el a fogkövet, hogy a felület tiszta és sima legyen. Ismételje meg az eljárást mindegyik fagon, ahol elváltozást lát. A fogkő eltávolítót csak a fogzománcos felületen használja, a fogínyen ne.

A fogköz tisztítót és a fogkő eltávolítót csak felnőttek használhatják! Néhány anyag, amely a fogköben található vérrög kialakulásához vagy szívbetegek kockázatának növekedéséhez vezethet, ezért öblítse ki többször is alaposan a száját vízzel vagy szájvízzel bármely két eszköz használata közben. Amennyiben a fogínye vérezni kezd, hagyja abba a kezelést és kérje ki fogorvosa tanácsát!