

# LUX

## IPL SZŐRTELENÍTŐ

használati útmutató



the beauty specialists

## FIGYELMEZTETÉSEK

- **Olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi tanulmányozás céljára!**
- A készüléket 8 év feletti gyermek vagy csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben az felügyelet alatt történik vagy tájékoztatást kapnak a készülék biztonságos használatáról és megértik az előfordulható veszélyeket! Ügyeljen rá, hogy gyermeke ne játsszon a készülékkel!
- Ne irányítsa a kezelőfejet közvetlenül a szembe vagy annak közelébe!

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Visszaverődés veszély: kérjük, használat előtt távolítsa el ékszereit a kezelni kívánt felületről és azok környékéről!
- NE használja a készüléket gyúlékony anyag közelében!
- NE használja a készüléket párás környezetben (fürdőkádhoz vagy tusolóhoz közel)!
- NE használja a készüléket, ha víz fröccsent rá!
- NE merítse vízbe a készüléket!

### **Nem megfelelő bőr és szőrtípusok**

- A készülék nem alkalmas sötét bőrtónusú, afro-caribi, fekete afrikai, indiai vagy pakisztáni ember számára. Lásd „Megfelelő bőrtípus” rész. A kezelés előtt minden esetben

## FIGYELMEZTETÉSEK

végezzen bőrtesztet!

- A készülék nem alkalmas vörös, világos szőke, ősz vagy fehér szőrszálak eltávolítására.

### Elkerülendő területek

- NE végezzen kezelést a következő területeken: tetoválásokon, állandó sminken, pattanásokon, szemölcsökön, fekete foltokon vagy anyajegyeken, sötét foltokon, bőrbetegségek esetén, tűzfoltokon, égési sérüléseken, a száj, a mellbimbók, a nemi szervek és az ánuszt területein, ekcémánál, a szempillánál, a szemöldöknél, visszéren, pikkelysömörön, herpesz esetén, nyílt seben!

## FIGYELMEZTETÉSEK

**Ne használja a készüléket ha:**

- Ön terhes vagy szoptat, epilepsziás, vagy ha olyan gyógyszert szed, amiről tudja, hogy növeli fényérzékenységet. Ha korábban volt már epilepsziás rohama, akkor nem javasoljuk a készülék használatát. Hétköznapi gyógyszerek is okozhatnak fényérzékenységet, így ha gyógyszert szed, érdemes megnézni a gyógyszer tájékoztatóján a fényérzékenységi figyelmeztetést, és ha bármilyen kétség merül fel, forduljon kezelőorvosához! Olyan hétköznapi gyógyszerek is tartalmazhatnak fényérzékenységet okozó összetevőket, mint néhány vízhajtó, antibiotikum, triciklikus antidepresszánsok és felírt a pajzsmirigyre és ízületi gyulladásra felírt gyógyszerek.

## FIGYELMEZTETÉSEK

- NE használja, ha már korábban szenvedett bőrrákban!
- NE használja, ha cukorbeteg, vesebeteg, szívbeteg vagy a pajzsmirigy problémákkal küzd!
- NE térjen vissza ugyanarra a területet többször egy kezelés alatt!
- NE használja olyan területen, ahol később vissza szeretné növeszteni a szőrt!

### **Esetlegesen fellépő bőrreakciók:**

- A legtöbb ember melegséget érez a kezelés során. Vannak, akik enyhe bőrpírt tapasztalnak. A legtöbb esetben ez 24 órán belül megszűnik, de nagyritkán előfordulhat, hogy akár 72 órán keresztül is eltart.

## FIGYELMEZTETÉSEK

Ne folytassa a kezelést, ha az alábbi mellékhatásokat tapasztalja. Minden esetben nyugtassa meg, hűtse a területet. Javasoljuk, hogy aloévera gélt használjon ehhez. Ha a tünetek 48 óra elteltével sem enyhülnek, forduljon szakorvoshoz!

- Fájdalom a kezelt területen
- Viszketés a kezelt területen
- Erős bőrpír

Azonnal forduljon orvoshoz, ha a következők bármelyike is bekövetkezik: Hólyagosodás vagy égés

- Ha a készülék rendellenesen viselkedne, lehet, hogy ezért külső elektromágneses rezgések a felelősek, mint például villanymotoros készülékek, hangszórók. Ebben az esetben távolítsa el ezeket, és indítsa újra a készüléket.

## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- 1 Impulzus gomb
- 2 Teljesítményszint kijelző
- 3 Bekapcsoló „Power” gomb
- 4 Kezelőfej (lámpa)
- 5 Elektromos csatlakozó



## BEVEZETÉS

A Rio Lux IPL szőrtelenítő TM –t arra tervezték, hogy drága és fájdalmas szalonba történő kezelése nélkül, könnyedén megszüntesse a nem kívánt szőrzetet. Ez tudományosan bizonyított, biztonságos és hatékony szőrtelenítési módszer melyet több mint 15 éves klinikai vizsgálatoknak vetették alá. Az eredmények, általában a negyedik kezelés után válnak először láthatóvá, de a szőrmennyiség jelentős csökkenése nagyságrendileg a 8-10, kezelés után érhető el. Az eredmények nagyban függenek az egyén szőrtípusától és annak növekedési ciklusától, így néhány ember lehet, hogy már néhány alkalom után észrevehető eredményeket ér el, míg mások számára ez több időt vehet igénybe.

## AZ IPL SZŐRTELENÍTÉS LÉNYEGE



Helyezze óvatosan a készüléket a bőrre. A pulzáló fény közvetlenül a szőrszálba jut, olyan erővel, mely életképtelenné teszi a szőrtüszőt, anélkül, hogy bármi káros hatást fejtené ki a környező területre.

A szőrtüsző blokkolása maradandó kárt okoz a szőrszál gyökerében.

A fényenergiát a melanin pigment elnyeli, felgyorsítva ezzel a szőrtüsző felmelegedését. A hő elpusztítja a szőrszál növekedéséért felelős sejteket.

## A SZŐR NÖVEKEDÉSI CIKLUSA


Az IPL kezelés az aktív szőrnövekedési szakaszban a leghatékonyabb. Minden esetben van egy adott százalékos szőrmennyiség aktív növekedési szakaszban (a tényleges százalékték az egyik testrésztől a másikig változik).

Az összes szőrszál aktív szakaszban való találásához adott számú hónapra jó néhány kezelést kell betervezni. Tipikus kezelési terv lehet:

Kezelés 1-4: 2 hetente

Kezelés 5-8: 4 hetente

Kezelés 8+: 4-6 hetente, vagy szükség szerint

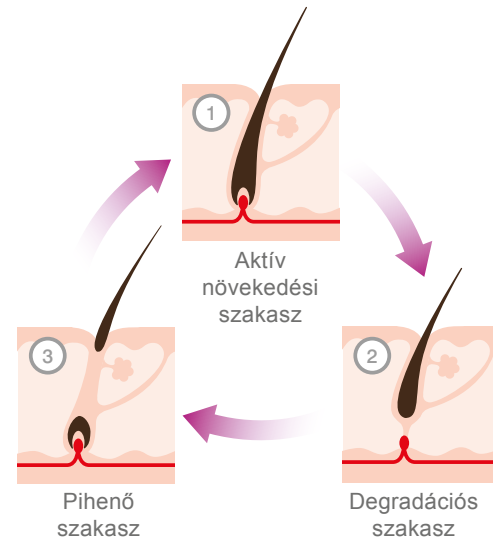

## MEGFELELŐ BŐRTÍPUS

Az IPL szőrtelenítő a halvány fehér színű bőrtől, az oliván át egészen a napbarnított bőr típusok kezelésére alkalmas. Ahhoz, hogy a kezelés hatékony legyen, a szőrszálnak sötétebbnek kell lennie, mint a környező bőr. A legjobb eredmény, sápadt bőrön lévő sötét szőrszál esetén érhető el.

Előfordulhat, hogy a különböző területeken eltérő teljesítményszinteket kell alkalmazni. Minden területet tesztelni kell a kezeléshez használható maximális teljesítményszintre.

A bőrtípusát az alábbi táblázat alapján azonosíthatja be.

## BŐRTÁBLÁZAT

Bőrtípus	Bőrszín	Bőrtónus	Reakció napozáskor	Maximális kezelési szint
I	Halvány fehér		Mindig leég, nem bamul	Mind az öt fokozatot használhatják a bőrpóbától függően
II	Fehér		Mindig leég	
III	Fehér/ világos oliva		Enyhén leég	Használja az 1,2 és a 4 fokozatot a bőrpóbától függően
IV	Oliva/ napbarnított		Ritkán ég le, könnyen barnul	
V	Sötét bama		Nagyon ritkán ég le	Használja az 1,2 és a 3 fokozatot a bőrpóbától függően
VI	Fekete		Soha sem ég le	Nem alkalmas IPL kezelésre

## BŐRTESTZT

24 órával a kezelés megkezdése előtt végezzen próbakezelést egy kisebb területen!

Kezeljen egy kis területe minden egyes erősségi szinten, míg el nem éri a bőrnek megfelelő legfelső szintet (lásd táblázat). A Power gombbal lépésenként növelheti vagy csökkentheti a kezelés erősségi szintjét, míg el nem éri a bőre számára alkalmas szintet.

Ha bármilyen kellemetlenséget észlel, akkor az egyel alacsonyabb erősségre állítsa vissza a készüléket.

A kezelés során – nem minden esetben – enyhe bőrpír jelentkezhet. Amennyiben 24 órával később, bármely tesztelt bőrfelületen bőrpírt vagy gyulladást lát, mindenképp alacsonyabb erősségi szintet válasszon a kezeléshez!

**FONTOS:** A bőr színe a különböző testrészeken eltérő lehet, így előfordulhat, hogy különböző területeken különböző erősségi szint beállítása szükséges. Minden területen meg kell találni a megfelelő erősséget.

## KEZELÉS ELŐTT

Kérjük, hogy kezelés megkezdése előtt olvassa el a “Figyelmeztetések” részt!

- **Ne használjon semmilyen olyan szőrtelenítési módszert (gyanta, epilátor vagy csipesz), ami a szőrszálat eltávolítja a szőrtüszőből, mivel az hatástalanná teszi az IPL kezelést!**
- **Távolítsa el az összes ékszert a kezelt területről és annak közeléből!**
- **Minden esetben végezzen bőrtesztet a kezelni kívánt területen, 24 órával a tervezett kezelés előtt, és legyen tisztában maximálisteljesítmény szinttel!**



## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### 1. LÉPÉS

A kezelés előtt győződjön meg róla, hogy a kezelni kívánt terület borotvált, tiszta és száraz.

### 2. LÉPÉS

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez és az elektromos aljzatba. Az „ON/OFF/READY” jelzőfény világít.

### 3. LÉPÉS

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a POWER gombot és az „ON/OFF/READY” jelzőfény zöldre vált.

### 4. LÉPÉS

Az „ON/OFF/READY” jelzőfény bekapcsol és az I. teljesítményszint jelzőfény világít.

### 5. LÉPÉS

A POWER gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kezelési szintet. A kiválasztott szint alatti jelzőfény zölden világít.

### 6. LÉPÉS

A kezelőfejet fektesse a kezelendő bőrfelületre. Ha a kontaktus a kezelőfej és a bőr között megfelelő, az „ON/OFF/READY” jelzőfény villogni kezd.

### 7. LÉPÉS

A villantáshoz nyomja meg az Impulzus gombot. Egy enyhén meleg, bizsergő érzést fog érezni a bőrfelületén.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### 8. LÉPÉS

Emelje el a készüléket a bőrfelületről, de úgy hogy ne keletkezzen köztük rés, majd kis átfedéssel helyezze vissza a bőrre a következő impulzus leadásához. Látni fogja a benyomódásokból a már kezelt területe. Egy kezelésen alkalmával, egy területet csak egyszer kezelje!

### 9. LÉPÉS

A kezelés végén, a készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 2 másodpercig a POWER gombot. Húzza ki az adaptert az elektromos aljzatból.

**Megjegyzés:** a kezelendő bőrfelületnek megfelelően kétféle mód áll rendelkezésre.

- A **Precíziós mód** az érzékeny, a test finomabb részeinek kezelésére szolgál (pl. arc, hónalj, bikini vonal).
- A **Gilde mód** nagyobb területek, azaz láb karok vagy törzs kezelésére való. Helyezze a bőrre, nyomja le és tartsa lenyomva az impulzus gombot. Két impulzus között, a kontaktus megszüntetése nélkül, helyezze át a kezelőfejet a következő területre. A Gilde mód kikapcsolásához engedje fel a impulzus gombot.

Hozzávetőleges kezelési idők:

- Fél láb: 8-10 perc Glide üzemmódban
- Teljes láb: 15 perc Glide üzemmódban
- Bikini vonal: 2 perc Precision módban
- Hónalj: 1 perc Precision módban

# HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

## AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ

Ha a készüléket több mint 10 percre nem használja, akkor automatikusan kikapcsol, és a "ON / OFF / READY" jelzőfény narancssárgára vált.

Ahhoz, hogy ismét használni tudja, nyomja meg a power gombot és állítsa be a kívánt teljesítmény szintet.


## ARCKEZELÉS

Az arckezelést mindig a Precision módban végezze; soha ne használja a Glide módot. Az arckezelés során, két villantás között mindig várjon 5 másodpercet és a kezelés ne tartson tovább 10 percnél.

A Rio Lux IPL szőrvesztő biztonságosan használható az arc területén, a mellékelt ábrán látható fehér szaggatott vonalon belül.

Óvintézkedések:

- Villantáskor ne nézzen közvetlenül a kezelt területre.
- Ne használja a készüléket szempilla, fej haj vagy szemöldök kezelésére.
- Ne használja a szem vagy a száj körül..

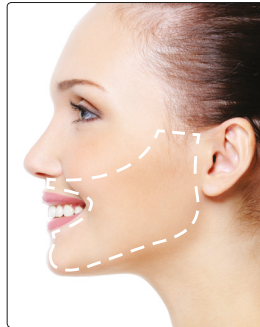

## KEZELÉS UTÁNI BŐRÁPOLÁS

A kezelés után:

- A kezelt területet ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Óvja bőrét fényvédő szerekkel a kezelést követően két hétig.
- Kezelés után ne használjon illatosított krémeket, parfümök vagy dezodor a kezelt területen.

## KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

### **Milyen érzés a használata?**

A legtöbb ember, melegedést érez a bőrön. Enyhe, napégéshez hasonló irritációt tapasztalhat, ha túl magas fokozaton használja a készüléket, vagy nem borotválta le előtte a területet. Férfiak a kezelés alatt több kényelmetlenséget éreznek, mivel az ő szőrük erősebb és vastagabb, mint a nőké, ám ez az érzés hamar elmúlik.

### **Használhatok IPL-es szőrtelenítő készüléket, ha érzékeny a bőröm?**

Igen, az IPL-es szőrtelenítő gép a szőrszállal lép csak reakcióba és a körülvevő bőrt nem érinti.

### **Mi mutatkozik a bőrömon a kezelés után?**

Általában nem jelentkezik érzékelhető változás. Halvány pír feltűnhet a kezelés területén, de ez normális esetben 24 órán belül elmúlik. A szőr környékén előfordulhat pirosodás, ez is teljesen normális. Ha bármely területen a pirosodás vagy a gyulladás 24 óra után is megmarad, az azt jelenti, hogy túl erős kezelést választott. Kérjük, tekintse meg a „Patch teszt” című szakaszt.

## KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

### **Mit kell kerülni a kezelés után?**

Kerülje a napozást és szoláriumozást a kezelést követő 48 órában!

Ha fedetlen bőrrel megy napra, használjon napvédőt! Szintén kerülje a dörzsölést, a hámlasztó termékek használatát. A kezelés után 48 óráig ne ússzon klóros vízben és ne szaunázzon. A klóros víz, viszkető érzést okozhat.

## KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

### **Milyen sűrűn ismétljem az IPL-es szőrtelenítő kezelést?**

Két kezelés között eltelt idő nem kritikus fontosságú. Az egymást követő kezeléseik között két hét kihagyást ajánlunk, mégis van, aki minden héten szereti használni, vagy akár minden nap, az összes látható szőrszál eltávolítására, s van, aki csak havonta egyszer. Mindaddig, amíg a szőrtüsző vagy a környezete ki nem pirosodik, nem fáj, nem gyullad be, akár 48 óránként is megismételheti a kezelést. Kerülje ugyanazon terület túlzott kezelését, mert az bőrpírt vagy duzzanatot eredményezhet. A tartós szőrtelenítéshez 4-6 hetente ismétlje meg a kezelést.

### **Van valamilyen kezelés utáni rutin, melyet követnem kell?**

Ha szeretné, kenje be parfümentes testápolóval a kezelt területet, vagy nyugtassa a bőrt jéggel, vizes törölközővel, noha a kezelés utáni 24 órában nem ajánljuk szappan használatát a kezelt területen. 3 napig ügyeljen, hogy nagyon tisztán tartsa a kezelt területet. A hónalj esetében 2-3 napig ne használjon izzadás gátlót. 48 óráig kerülje a napozást

## KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

### **Hány kezelésre lesz szükségem?**

Ez egyénileg különböző lehet és függ a kezelt területtől, a szőrszál sűrűségétől és növekedési szakaszától. Sötét szőr és világos bőr esetén a leghatékonyabb az IPL-es kezelés, de mind sötét, mind világos szőrön hosszabb távú kezelést igényel a tartós eredmény. Kezdetben minden kezeléssel ritkulnak és vékonyodnak a szőrszálak. A szőrmentes bőr megtartásához ismétlje meg a kezelést 4-6 hetente.

### **Használhatok más szőrtelenítést a kezeléseim között?**

Mivel az IPL technológiához fontos, hogy a szőr gyökere a helyén legyen, kezeléseim között ne alkalmazzon gyantázást, epilálást, valamint csipeszt. A szőrszálak szőkítése szintén tilos a kezeléseim közben, mivel ez eltünteti a melanint a szőrből, s így nem lesz hatékony a kezelés. Borotva, szőrtelenítő krém és mikro-dermabráziós korong használata megengedett a kezeléseim között.

## KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

### **A kezelt területen miért nő vissza a szőrszál?**

Ez elég gyakori jelenség, hogy a szőrszál egy-két hétig a kezelés után továbbra is növekszik. Két hét múlva, észrevehető lesz, hogy a szőrszál kihullik vagy kijön a tüszőből. Minden esetben hagyja, hogy magától essen ki és soha ne húzza ki a szőrszálat. Egyes szőrszálak nem változnak, köszönhetően a nem megfelelő kezelésnek, vagy azért mert a szőrszál pihenő állapotban van.

### **A hosszú távú használat károsítja a bőromet?**

Az elmúlt 15 évben, a villanófényes szőrtelenítés használatát szakfolyóiratokban dokumentálták és nem jelentettek a hosszú távú kezelésekkal járó mellékhatást, vagy sérüléseket.

## FONTOS

- A készülék használata során, nem lenne szabad kellemetlen érzéseket tapasztalnia. Előfordulhat, hogy a kezelt terület felmelegedését érzi. Amennyiben huzamosabb ideig kellemetlenséget tapasztal, lehet, hogy a kiválasztott teljesítmény szint túl magas.
- Használat közben ne takarja le a kezelőfej szellőzőnyílásait!
- Ne helyezze a készüléket puha felületre, az ugyanis gátolhatja a szellőzést!
- Ne használja a készüléket, ha alkoholt fogyasztott, nem érzi jól magát!
- Ne használja a készüléket rövid vagy mikrohullámú eszközök közelében!
- Ha a készülék rendellenesen viselkedne, lehet, hogy ezért külső elektromágneses rezgések a felelősek. Ebben az esetben távolítsa el a forrást, és indítsa újra a készüléket.
- Ne hagyja figyelmen kívül a biztonsági előírásokat!
- Ne használja a készüléket a használati utasításban leírtaktól eltérő célra!
- A készülék csak otthoni felhasználásra alkalmas. Ne használja nagyüzemi tevékenységre!

## KARBANTARTÁS

- Csak az eredeti hálózati tápvezetékekkel használja a készüléket!
- Használat után mindig húzza ki és gyermekek elől elzárt helyen tárolja a készüléket!
- Ha a készülék, vagy a kábel bármi módon megsérül, hagyja abba a kezelést!
- A meghibásodott elektromos vezetékét csak szakképzett szerelő cserélheti ki. A forgalmazó semmilyen felelősséget sem vállal a nem szakszerű cseréből eredő károkért, sérülésekért!
- Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, illetve javítását! Ha bármilyen jellegű probléma lépne fel a készülékkel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot cégünkkel.
- Használat után nyirkos ruhával törölje át a készüléket!
- Az IPL nyíláson lévő lerakódások befolyásolhatják az IPL hatékonyságát. Ha lerakódást észlel, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Gyolcsmentes ruhával vagy pamuttal tisztítsa meg, és győződjön meg róla, hogy a nyíláson nem maradt textilszál!

## ÁRAMTALANÍTÁS



z elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről szóló (2012/19/EU) (Waste of Electrical and Electronic Equipment - WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká vált elektronikai termékek újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási technológiák alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes összetevők kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése érdekében. A termék besorolás szerint elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának lejártakor, azt a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni!

## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

E-mail: [info@mopa.co.hu](mailto:info@mopa.co.hu), Telefon: +36 30 6 560 292, Munkanapokon: 9.00-16-óraig

## MŰSZAKI ADATOK

### KÉSZÜLÉK:

**Fényforrás:** Quartz lámpa  
**Kezelési terület:** 30 x 10mm  
**Kimeneti hullámhossz:** >560nm  
**Elektromos hálózat:** 12V = 3A, 36W

### POWER ADAPTER:

**Bemenet:** AC100-240V~50/60Hz  
**Kimenet:** 12V=3A ⊖⊕

## KÖRNYEZET

### HŐMÉRSÉKLET:

**Üzemeltetési:** 0 és +35 Celsius  
**Tárolási:** -5 és +40 Celsius

### PÁRATARTALOM:

**Üzemeltetési:** 10% to 60% RH  
**Tárolási:** 5% to 90% RH

HU



[www.rioszepsegapolas.hu](http://www.rioszepsegapolas.hu)

Rio, Dezac és a LUX IPL Hair Removal a The Decac Group Ltd bejegyzett védjegyei © The Decac Group Ltd 2017  
A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl Széchenyi út 31.

1-IN-IPHH-HU/1.0