

# YES!™

LÉZERES SZŐRTELENÍTŐ

Használati útmutató



the beauty specialists

## FIGYELMEZTETÉSEK

- **Olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi tanulmányozás céljára!**
- A készüléket 8 év feletti gyermek vagy csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben az felügyelet alatt történik vagy tájékoztatást kapnak a készülék biztonságos használatáról és megértik az előfordulható veszélyeket! Ügyeljen rá, hogy gyermeke ne játsszon a készülékkel! A készülék tisztítását, gyermek csak felügyelet mellett végezheti!
- A készüléket kizárólag a csomagolásban található hálózati adapterrel használja.
- A készülék alacsony feszültségről üzemel, ahogy ezt a rajta lévő

## FIGYELMEZTETÉSEK

- szimbólum is tanúsítja.
- Ha a hálózati adapter bármely része vagy az elektromos vezeték meghibásodik, ne használja tovább a készüléket.
- A készülék nem alkalmas afro-caribi vagy sötét bőrtónusú személyek, illetve ősz szőrszálak kezelésére. Lásd „Megfelelő bőrtípus” rész.
- A lézeres kezelés nem okoz kellemetlenségeket. Ámbár előfordulhat az egyes szőrszálak kezelésénél, hogy enyhe tűszúrás szerű érzést vagy helyi felmelegedést tapasztal.
- Ha mégis bármilyen kellemetlenséget vagy fájdalmat tapasztalna, lehet hogy a kezelés erőssége túl magas.
- A beépített biztonsági funkciók védik a szemet a lézersugaraktól,

## FIGYELMEZTETÉSEK

de soha ne irányítsa a kézi egységet szemre vagy annak közelébe!


- Ne használja a készüléket gyúlékony anyag közelében!
- Visszaverődés veszély: kérjük, használat előtt távolítsa el ékszereit a kezelni kívánt felületről és azok környékéről!
- Ne térjen vissza ugyanarra a területet többször egy kezelés alatt!
- Ne használja a készüléket, ha előtte alkoholt fogyasztott, ha rossz közérzetű, vagy fáradt!
- Ne végezzen kezelést a következő területeken: tetoválásokon, állandó sminken, pattanásokon, szemölcsökön, fekete foltokon vagy anyajegyeken, sötét foltokon, bőrbetegségek esetén, tűzfoltokon, égési sérüléseken, a száj, a mellbimbók, a nemi szervek és az ánuszt területein, ekcémánál, a szempillánál, a

## FIGYELMEZTETÉSEK


szemöldöknél, a szemek közelében, az orr illetve a fül szőrzetén!

- Ez egy érzékeny, lézer szkennelő termék. Ügyeljen rá, hogy az egység mechanizmusa ne sérüljön meg!
- Amennyiben a készülék vagy annak bármely része megsérülne vagy meghibásodna, ne próbálja megjavítani! Ebben az esetben forduljon az ügyfélszolgálatához.
- A készülék rendellenes használata annak sérülését illetve balesetet okozhat.
- Ne hagyja figyelmen kívül a biztonsági előírásokat, ne bontsa meg a készüléket.
- A készüléket használat során tartsa távol az erős elektromágneses területektől valamint mágneses dolgoktól.


## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

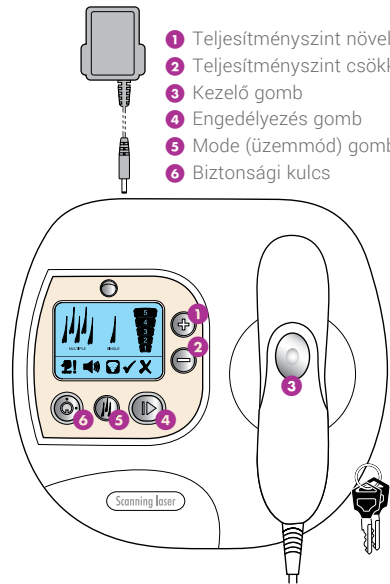

- 1 Teljesítményszint növelő gomb (+)
- 2 Teljesítményszint csökkentő gomb (-)
- 3 Kezelő gomb
- 4 Engedélyezés gomb
- 5 Mode (üzemmód) gomb
- 6 Biztonsági kulcs

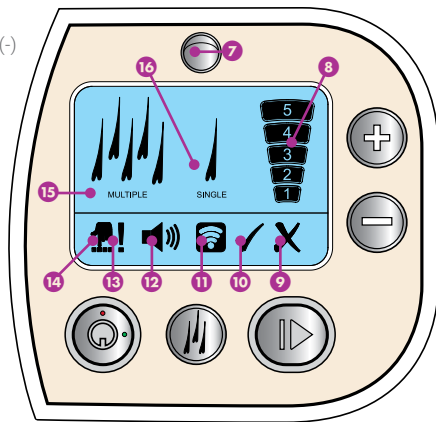

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 7 Bőrszín felismerés      | 12 Hang / Némitás         |
| 8 Teljesítményszintek 1-5 | 13 Hiba                   |
| 9 Nem megfelelő bőrtípus  | 14 Biztonsági kód sorrend |
| 10 OK kattánás            | 15 Több szőrszál mód      |
| 11 Bőrszín azonosítás     | 16 Egy szőrszál mód       |

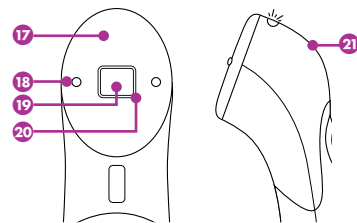

- 17 Narancs fény
- 18 Érintkező tük
- 19 Lézer nyílás
- 20 Azonosító rész
- 21 Fehér fény



“ Mondj búcsút a borotvának, gyantázásnak és az epilálásnak...  
**YES!**”



## TUDOMÁNY

### LÉZER TECHNOLÓGIA



A lézeres szőrtelenítő úgy működik, hogy egy lézersugarat küld a szőrtüszőhöz elég energiával ahhoz, hogy véglegesen leállítsa a szőrtüsző működését anélkül, hogy roncsolná a környező területet. Az eredmény: tartós szőrtelenítés. Használata egyszerű, és tökéletesen alkalmas a nem kívánt arc- vagy a testszőrzet eltávolítására.


A bőr és a haj tartalmaz egy természetes pigmentet az úgynevezett melanint. A bőrben lévő melanin szint határozza meg a bőr színét, és felelős a bőr barnulásának szintjéért a napozás során. A bőr és a szőrtüszők eltérő koncentrációjú melanint tartalmaznak.

A lézersugár egy egyenes hullámhosszú, intenzív fénysugár. A YES lézer egy olyan hullámhosszú lézersugarat alkalmaz, amely szelektíven célozza a szőrtüszőben lévő melanint, mivel a szőrtüsző elnyeli az érkező lézer energiát. Az elnyelt energia a szőrtüsző gyors felmelegedését okozza. Ez a hő elpusztítja a haj növekedéséért felelős sejteket. A megfelelő hőmérséklet elérésekor a szőrtüsző működésképtelen lesz, ami a tartós szőrtelenítést eredményez. A bőr sértetlen marad, mivel ez a hullámhossz-tartomány semmilyen hatással sincs rá.

A szőrszál kezelése akkor a leghatékonyabb, ha a szőrszál az aktív növekedési szakaszában van. A tartós szőrtelenítéshez egy hat alkalomból álló, hathónapos időszakon belüli kezelés javasolt. Az erősebb, makacs szőrszálak kezelését sűrűbben is elvégezheti.

### Milyen érzéssel jár a kezelés?

A legtöbb ember nem érez semmit, de enyhe tűszúráshoz hasonló érzet valamint egy kis felmelegedés előfordulhat egyes szőrszál kezelése során.

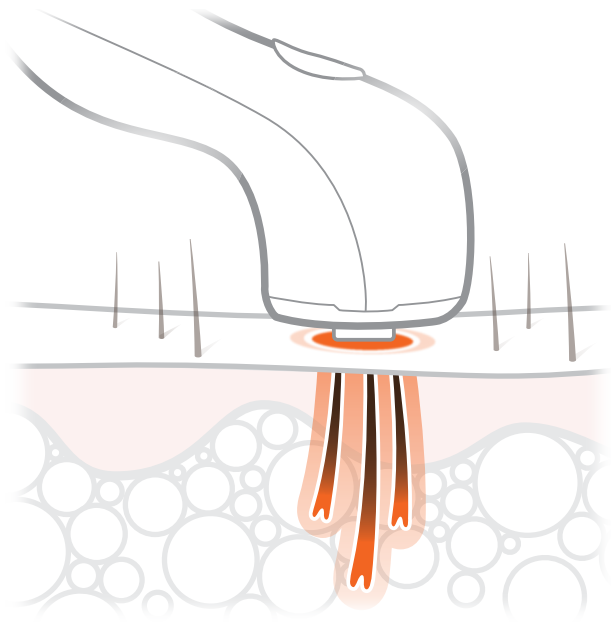

### Kik ne használják a lézeres szőrtelenítőt?

A lézeres szőrtelenítés nem megfelelő az alábbi bőrtónusú vagy szőrtípusú személyek számára:

- Afro-Caribi vagy sötét bőrtónus esetén - itt a bőr melanin tartalma túl magas.
- Fehér vagy ősz szőrszálak esetén - itt nem megfelelő melanin van jelen a szőrszálakban.

**A következő oldalon lévő táblázat segítségével leellenőrizheti, hogy az ön bőre alkalmas-e a lézeres szőrtelenítésre és ha igen, milyen kezelési szint alkalmazása javasolt.**



## BŐRTÍPUSOK ÉS KEZELÉSI SZINTEK

Bőrszín	Reakció napozáskor	Maximum kezelési erősség
Extrém fehér	Mindig leég, sosem barnul	5 4 3 2 1 Mind az öt fokozat használhatják a bőrpróbától függően
Fehér	Mindig leég	
Világos napbarnított	Néha leég	
Világos barna	Ritkán ég le	3 2 1 A bőrpróbától függően használja az 1,2 és a 3 fokozatot
Sötétbarna	Nagyon ritkán ég le	<b>Nem alkalmas lézeres szőrtelenítésre</b>
Fekete	Sosem ég le	

## VÁGJUNK BELE

### BŐRTESZT ✓

24 órával a kezelés megkezdése előtt végezzen próbakezelést egy kisebb területen!

Kezeljen egy kis területet minden egyes erősségi szinten, míg el nem éri a bőrének megfelelő legfelső szintet (lásd táblázat). A + és a – gombokkal növelheti vagy csökkentheti a kezelési erősségi szintjét. Ha bármilyen kellemetlenséget észlel, akkor az egyel alacsonyabb erősségre állítsa vissza a készüléket.

A kezelés során – nem minden esetben – enyhe bőrpír jelentkezhet. Amennyiben 24 órával később, bármely tesztelt bőrfelületen bőrpírt vagy gyulladást lát, mindenképp alacsonyabb erősségi szintet válasszon a kezeléshez!

**MEGJEGYZÉS:** A bőr színe a különböző testrészekben eltérő lehet, így előfordulhat, hogy különböző területeken különböző erősségi szint beállítása szükséges. Minden területen meg kell találni a megfelelő erősséget.



### Hogyan készítsem fel bőrömet a lézeres kezelésre?

A lézeres szőrtelenítés nem igényel különösebb előkészítést, de kezelés előtt mindig alaposan tisztítsa le bőrét. A lézeres szőrtelenítés világos bőrön a leghatékonyabb, ezért kezelés előtt azt javasoljuk, kerülje a napozást, szoláriumozást.

### Hogyan készítsem elő szőrszállaimat a lézeres kezeléshez?

Javasoljuk, hogy a kezelni kívánt területet borotválja le, biztosítva ezzel azt, hogy a lézersugár közvetlenül a szőrtüszőhöz jusson és ne égesse el a szőrszálat a bőr felszínén.

### Milyen területeket kezelhetek?

A test legtöbb területén alkalmazható a lézeres szőrtelenítő készülék. A leggyakoribb területek az arc, a hónalj, a lábak, a mellkas, a hát és a bikini-zóna. De nem ajánljuk a szemöldök szőrtelenítésére.

### Használható a lézeres szőrtelenítő érzékeny bőrön?

Igen, mivel csak a szőrszál reagál a lézerre, a környező bőrt nem érinti.

## BIZTOSÁGI INTÉZKEDÉSEK

### Biztonsági kulcs

Ha a készüléket nem használja, zárja le a kulccsal. Helyezze be a biztonsági kulcsot és a készülék feloldásához fordítsa el óramutató járásával megegyező irányba fordítsa el, hogy a nyíl a zöld pontra mutasson.



### Biztonsági kódsorozat

A készülék használatához meg kell adni a biztonsági kódsorozatot, ami a következő:

- 1 Teljesítményszint növelő gomb (+)
- 2 Mode gomb
- 3 Teljesítményszint csökkentő gomb (-)
- 4 Mode gomb

A biztonsági kódsorozat megváltoztatásához lapozzon a 28. oldalra..



## BIZTOSÁGI INTÉZKEDÉSEK


Ha a biztonsági kódsorozatot helyesen adta meg, az **OK jelzés** kattán egyet és a **több szőrszál mód** szimbólum jeleik meg. A készülék az 1-es teljesítményszintre kapcsol és az **engedélyezés gomb** villog. A legalacsonyabb teljesítményszint jelzőfény is világít.

**Megjegyzés:** Amennyiben a kódsorozat rosszul lett megadva, a készülék lezár. Fordítsa a biztonsági kulcsot az OFF állásba, várjon néhány másodpercig, majd fordítsa el a kulcsot az ON állásba. Adja meg újból a helyes biztonsági kódsorozatot.

## KEZELÉSI MÓDOK

A kezelési módok, minden egyes kezelés során az egyes szőrszálakat célozzák.


### scan mód - több szőrszál

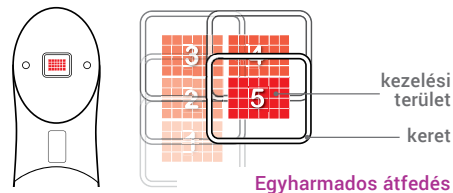

#### Egyharmados átfedés


Ha a készüléket a bőrre nyomja, egy kis bemélyedés marad a bőrön, mely a kezelt területet jelzi. A következő területre úgy helyezze át a készüléket, hogy a kezelt területek fedésben legyenek annak érdekében, hogy a kezelés hatékony legyen a teljes bőrfelületen.

### single mód - egy szőrszál

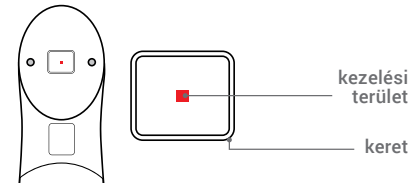


Az egy szőrszálás kezelési módban, a keret közepe az ideális hely a szőrszál kezelésére.


## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

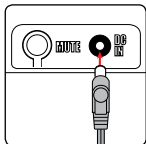


1. Csatlakoztassa az adaptert a készülék hátulján található csatlakozóba, a villásdugót pedig a hálózati elektromos aljzatba.

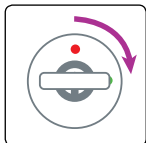


2. A biztonsági kulccsal oldja fel a készüléket. Lásd **“biztonsági intézkedések”** rész a 15. oldalon. A biztonsági kód szimbóluma villog.

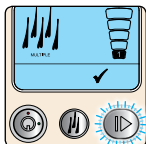


3. **Adja meg a biztonsági kódsorozatot** - lásd 15. oldal - az **OK jelzés** kattán egyet és a **több szőrszál mód** szimbólum jeleik meg. A készülék az 1-es teljesítményszintre kapcsol és az **engedélyezés gomb** villog.

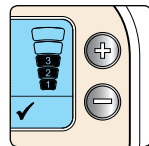

4. A +/- gombokkal válassza ki a bőrtípusának megfelelő teljesítményszintet. Lásd 12 oldal **“kezelési szintek”** rész a megfelelő kezelési szint kiválasztásához.

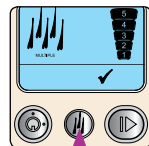


5. Ha az **egyes szőrszál mód** szeretné kiválasztani, nyomja meg a **MODE** gombot. (Lásd **kezelési módok** a 17. oldalon.)

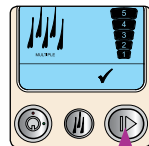


6. Nyomja meg az engedélyező gombot és a gomb körüli kék fény abba hagyja a villogást.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

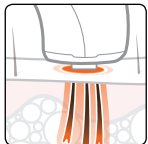


7. Helyezze a kezelőfejet a kezelni kívánt területre ügyelve arra, hogy az érintkező tűk hozzáérnek a bőréhez. A készülék érzékeli a bőrt; ha a kezelőfej a megfelelő pozícióban van, elől a fehér bőr érzékelés / kezelés fény világít.

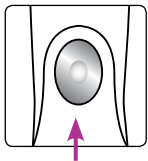

8. Nyomja és tartsa lenyomva a **kezelő gombot** a lézeres kezelés elindításához. A kezelés megkezdésekor a fehér kezelő fény villogni kezd, jelezve ezzel hogy a kezelés folyamatban van, a kiválasztott kezelési mód villog, és a készülék ismét sípol (ez lenémítható, lásd 21. oldal). Amikor a kezelés véget ér, a fehér fény és a kiválasztott kezelési mód abbahagyja a villogást. Ekkor áttérhet a következő kezelni kívánt területre. Amikor áttér a következő területre, az érintkező tűket el kell emelnie a bőrtől.

**Tipp:** Fontos, hogy a kezelés során a kontaktus mindvégig fennmaradjon. A megfelelő kontaktus biztosításához lehet, hogy módosítania kell az érintkező tű pozícióján. A kezelés akár 60 másodpercet is igénybe vehet a kezelési szint és a kiválasztott kezelési módtól függően.

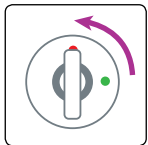

9. Kapcsolja ki és a biztonsági kulccsal zárja le a készüléket. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, vegye ki a biztonsági kulcsot és máshol tárolja, mint a készüléket. A készüléket és a kulcsot is gyermekétől védett helyen tárolja.

**Megjegyzés:** Ha 20 percen át semelyik gombot sem nyomja meg, a készülék készenléti állapotba kapcsol. Az újraindításhoz fordítsa a kulcsot OFF, majd ON állásba.


**Megjegyzés:** Ha a készülék rendellenesen viselkedne, lehet, hogy ezért külső elektromágneses rezgések a felelősek, mint például villanymotoros készülékek, hangszórók. Ebben az esetben távolítsa el ezeket, és indítsa újra a készüléket. A lézer semmilyen esetben sem okoz véletlen tüzet.

### Kilépés utáni visszaállítás

Ha a **hiba** szimbólum megjelenik és a készülék kilép, a biztonsági kulccsal egyszerűen kapcsolja ki a készüléket, várjon 5 másodpercet és indítsa el újra.

### MUTE (némítás) gomb

A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg a készülék hátulján található MUTE gombot. A gomb ismételt megnyomására a hangjelzés aktiválódik.

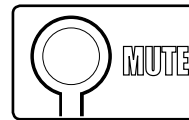

**Megjegyzés:** a némítás nem kapcsolja ki a figyelmeztető hangjelzéseket.

## GYAKORI KÉRDÉSEK

### Hogyan viselkedik a bőröm kezelés után?

Általában nincs látható változás a bőrön. A kezelés után enyhe bőrpír előfordulhat, de normál esetben 24 óra múlva megszűnik. A bőrpírt a szőrtüszők roncsolódása is okozhatja, mely normális jelenség. Ha azonban a bőrpír 24 óra elteltével sem enyhül vagy múlik el, a kezelés során a teljesítmény erőssége a bőrtípushoz képest túlságosan erős volt. Kérjük, olvassa el a Teszt című részt. Szintén fontos megjegyezzük, hogy a tartósabb bőrpír is eltűnik.

### Kerüljek valamit a lézeres szőrtelenítés után?

Kerülje a napozást és a szoláriumozást legalább 1 hétig! Ha mégsem kerülhető el a napfény, használjon fényvédőt. Ne használjon bőrradírt és hámlasztó kezeléseket. A kezelést követő 48 órában kerülje a klóros vagy forró vízben való fürdést. A vízben lévő klór, viszketést okozhat.

### Szükség van valamilyen utókezelésre?

Igény szerint alkalmazhat bőrnyugtató krémet, jeges vagy hideg vizes borogatást a kezelt terület lehűtésére. A kezelt területet 3 napig tartsa különösen tisztán. Ha lehetséges használjon antibakteriális szappant naponta kétszer. A hónalj kezelése esetén 2-3 napig ne használjon izzadás gátló dezodorokat.

### A kezelések között használhatok más szőrtelenítő eljárást?

A kezelések között ne használjon gyantát, epilátort és csipeszt mivel a lézeres szőrtelenítéshez a szőrtüszőben szőrszálnak kell lennie. A szőkítés is kerülendő, mivel a világos szőrt kevésbé sikeresen kezeli a lézer. A borotva, mikro-dermabráziós készülékek és a szőrtelenítő krémek használata a legideálisabb a kezelések között.

## GYAKORI KÉRDÉSEK

### Milyen gyakran ismételhetem a lézeres kezelést?

Mindaddig, amíg a szőrtüsző vagy a környező bőr nem válik pirossá, fájdalmassá esetleg gyulladttá. A kezelést 24 óra elteltével megismételheti, de javasolt 3-4 hetet várni a kezeléseket között, hogy a szőrszálak újranőhessenek. Kerülje egy azon terület túlzott kezelését, mert bőrpírt és duzzanatot okozhat.


### Hány kezelésre lesz szükségem?

Általában 6 kezelés után egy 6 hónapos időszakot követően hatékony a lézeres kezelés. Ez személyektől és a kezelt területtől függően eltérő lehet, valamint fontos tényező a szőrszálak sűrűsége, színe és növekedési ciklusa. Fehér bőrön sötét szőrszálak reagálnak a legjobban a lézeres kezelésre, de a sötét és világos szőrszálak is több kezelést igényelnek a tartós szőrtelenítéshez. Egyesek több, mások kevesebb kezelést igényelnek a megelégedettség eléréséhez. Kezdetben minden kezelés után fokozatos csökkenést lát a szőrszálak számában a kezelt területen. Hölgyek, akik férfi típusú hormonok miatt erős szőrnövekedéstől szenvednek, valószínűleg hosszán tartó kezelést igényelnek.

### Mikor a leghatékonyabb a lézeres kezelés?

A lézeres kezelés az aktív szőrnövekedési szakaszban a leghatékonyabb. Minden esetben van egy adott százaléku szőrmennyiség aktív növekedési szakaszban (a tényleges százaléérték az egyik testrésztől a másikig változik). Az összes szőrszál aktív szakaszban való találásához, adott számú hónapra, jó néhány kezelést kell betervezni

## A SZŐR NÖVEKEDÉSI CIKLUSA

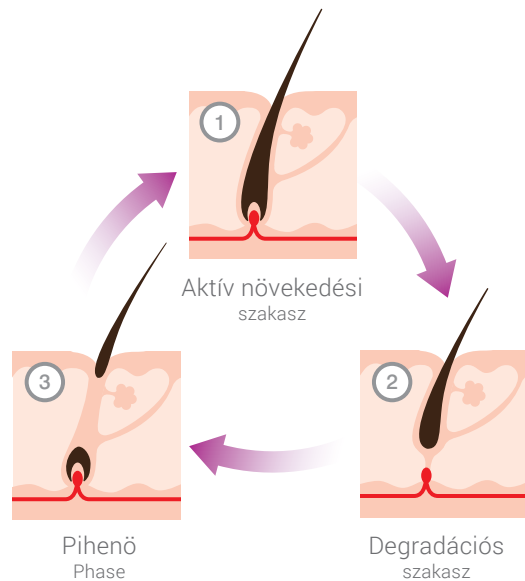

## A LÉZER NYÍLÁS TISZTÍTÁSA



Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lézer nyíláson nincs-e szennyeződés. A nyíláson lévő lerakódások befolyásolhatják a kezelés hatékonyságát. Ha lerakódást észlel, kapcsolja KI és áramtalanítsa a készüléket. Gyolcsmentes ruhával vagy pamutlaltal tisztítsa meg, és győződjön meg róla, hogy a nyíláson nem maradt textilszál!

## AMIT IGEN ÉS AMIT NE TEGYEN

- ✓ Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz és gyermekektől védett helyen tárolja
- ✓ A készüléket csak a csomagolásban lévő adapterrel használja.
- ✓ Hogy megóvja a lézert, ne tárolja a készüléket 40°C-nál magasabb hőmérsékletű helyen.
- ✓ Miután kihúzta a készüléket az elektromos hálózathoz, enyhén nyirkos textíliával törölje át. Az érintkező-tüskéket és a készülék elejét vattakoronggal tisztítsa meg.
- ✓ A készüléket csak rendeltetésszerűen használja és körültekintően tárolja.
- ✓ A hatékonyság megőrzése érdekében a lézer nyílást gyolcsmentes textíliával időszakosan tisztítsa meg.
- ✓ Ha a készülék rendellenesen viselkedne, lehet, hogy ezért külső elektromágneses rezgések a felelősek, mint például villanymotoros készülékek, hangszórók. Ebben az esetben távolítsa el ezeket, és indítsa újra a készüléket. A lézer semmilyen esetben sem okoz véletlen tüzet.
- ✓ Ne próbálja szétszedni vagy megjavítani a készüléket. Ha hibát tapasztal, forduljon a forgalmazóhoz.
- ✓ Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

## GYORS HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
<b>Ha elvesztette a kulcsot</b>	Jegyezze fel a készülék sorozatszámát és hívja fel ügyfélszolgálatunkat, küldünk Önnek egy másikat.
<b>A lézeres kezelés nem kezdődik el a kezelő gomb megnyomásakor</b>	Ellenőrizze az érintkező tűk és a bőr érintkezését.
<b>Nem világítanak a fények</b>	Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozó (hálózati adapter) mindkét vége megfelelően van csatlakoztatva. Amennyiben 20 percig érintetlenül hagyja a készüléket, az automatikusan kikapcsol. Ekkor fordítsa el a kulcsot „OFF” állásba, majd indítsa újra a gépet.

## A BIZTONSÁGI KÓDSOROZAT MEGVÁLTOZTATÁSA

Amennyiben a biztonsági kulccsal és a helyes kódsorozattal egyszer már feloldotta a készüléket, lehetősége van hozzárendelni az Ön saját kódsorozatát. MIELŐTT bármilyen más gombot megnyomna, nyomja meg a következő gombokat az alábbi sorrendben; háromszor a teljesítményszint növelő (+) gombot, majd háromszor a Mode (mód) gombot; háromszor a teljesítményszint csökkentő (-) gombot; majd végül ismét háromszor a Mode (mód) gombot.

A biztonsági kódsorozat és az 5. teljesítményszint szimbólumok villognak.

Üsse be az Ön által kiválasztott kódsorozatot. Ehhez 4 gombot használhat, kivétel ez alól a kezelés (treatment) és az engedélyezés (enable) gombok. Ezeket ne használja!

Minden gombnyomás megjelenik az 1 - 4-ig teljesítményszinten. Az új kódsorozat elfogadásakor mind az 5 teljesítményszint jelző háromszor felvillan. Ne felejtse el feljegyezni az új kódsorozatot és olyan helyen tárolja, ahol szükség esetén később is megtalálja!

Ha az új biztonsági kódsorozatot 20 másodpercen belül nem táplálja be, a készülék kilép és az új kód nem kerül mentésre. A készülék újraindításához fordítsa el a biztonsági kulcsot OFF állásba, majd ON állásba és üsse be az eredeti kódsorozatot.

Ha véletlenül a kezelés (treatment) gombot nyomja meg, akkor az a készülék kilépését fogja eredményezni és a készülék nem menti el az új kódsorozatot.

## TOVÁBBI AJÁNLATUNK

### Deep Pore Cleanser


Mikro-áram technológia segítségével tisztítja, hidratálja és frissíti fel bőrét, így a mélytisztítás hatására bőre új erőre kap és megélnékül.



## GARANCIA

A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát biztosítunk. Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia csak a számla bemutatásával érvényesíthető!

## ÁRAMTALANÍTÁS

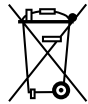

Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről szóló (2002/96/EC) (Waste of Electrical and Electronic Equipment - WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká vált elektronikai termékek újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási technológiák alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes összetevők kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése érdekében.

A termék besorolás szerint elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának lejártakor, azt a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni!

## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

E-mail: [info@mopa.co.hu](mailto:info@mopa.co.hu),

Telefon: +36 30 6 560 292

Munkanapokon: 9.00-16-óráig

**A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.**

**E-mail: [info@mopa.co.hu](mailto:info@mopa.co.hu)**



CLASS 1 PRODUCT  
CONTAINING  
CLASS 3B LASER



LASER SAFE®  
TECHNOLOGY



[www.riobeautyhungary.hu](http://www.riobeautyhungary.hu)

Rio, Dezac és a Yes Laser Hair Remover a The Dezac Group Ltd bejegyzett védjegyei © The Decac Group Ltd 2015

A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl Széchenyi út 31.

E-mail: [info@mopa.co.hu](mailto:info@mopa.co.hu)

1-IN-LAHC6-HU/1.0

HU

